

Adaptaid<sup>+</sup>

---

# ERGOFLEX

## Station de travail



Stérilisation/URDM

## ERGOFLEX Station de travail

Conçue pour répondre aux différents besoins du personnel de la santé, la station de travail ERGOFLEX fournit une aire de travail ergonomique et confortable qui permet une manipulation aisée des instruments à retraiter.

Associée à l'ergonomie et à la sécurité des travailleurs en milieu hospitalier, sa conception vise également la productivité, d'où un vaste choix de tailles et d'accessoires pour obtenir une configuration qui répond en tous points aux exigences spécifiques des usagers.

## Une station de travail multifonctionnelle et efficace

Les stations de travail ERGOFLEX sont conçues pour faciliter l'inspection, l'assemblage et l'emballage des instruments chirurgicaux. Afin de créer une configuration personnalisée, la table dispose d'une vingtaine d'accessoires qui peuvent être ajoutés au plan de travail ou à un dossieret dont la fonction est d'accroître le potentiel de rangement et de fournir un éclairage optimal.

MODÈLES	DIMENSIONS DU PLAN DE TRAVAIL			DIMENSIONS AVEC DOSSERET		
	POUCES	L X P	MM	POUCES	L X P X H	MM
RDM-010-P002-EX6030	60 x 30		1524 x 762	60 x 34 x 76		1524 x 864 x 1930
RDM-010-P002-EX6036	60 x 36		1524 x 914	60 x 40 x 76		1524 x 1016 x 1930
RDM-010-P002-EX7230	72 x 30		1829 x 762	72 x 34 x 76		1829 x 864 x 1930
RDM-010-P002-EX7236	72 x 36		1829 x 914	72 x 40 x 76		1829 x 1016 x 1930
RDM-010-P002-EX8436	84 x 36		2134 x 914	84 x 40 x 76		2134 x 1016 x 1930



### Compacte

RDM-010-P002-EX6030  
Idéale pour les locaux exigus, cette table offre un espace de rangement volumineux sur la tablette inférieure.




### Fonctionnelle

RDM-010-P002-EX7230  
Une solution conviviale qui rallie ergonomie et accessibilité grâce au dossieret et à la proximité des accessoires.



### Efficace

RDM-010-P002-EX7236 & RDM-010-SC  
Équipée d'un support de champs et d'un dossieret, cet ensemble forme une station de travail complète et ergonomique.

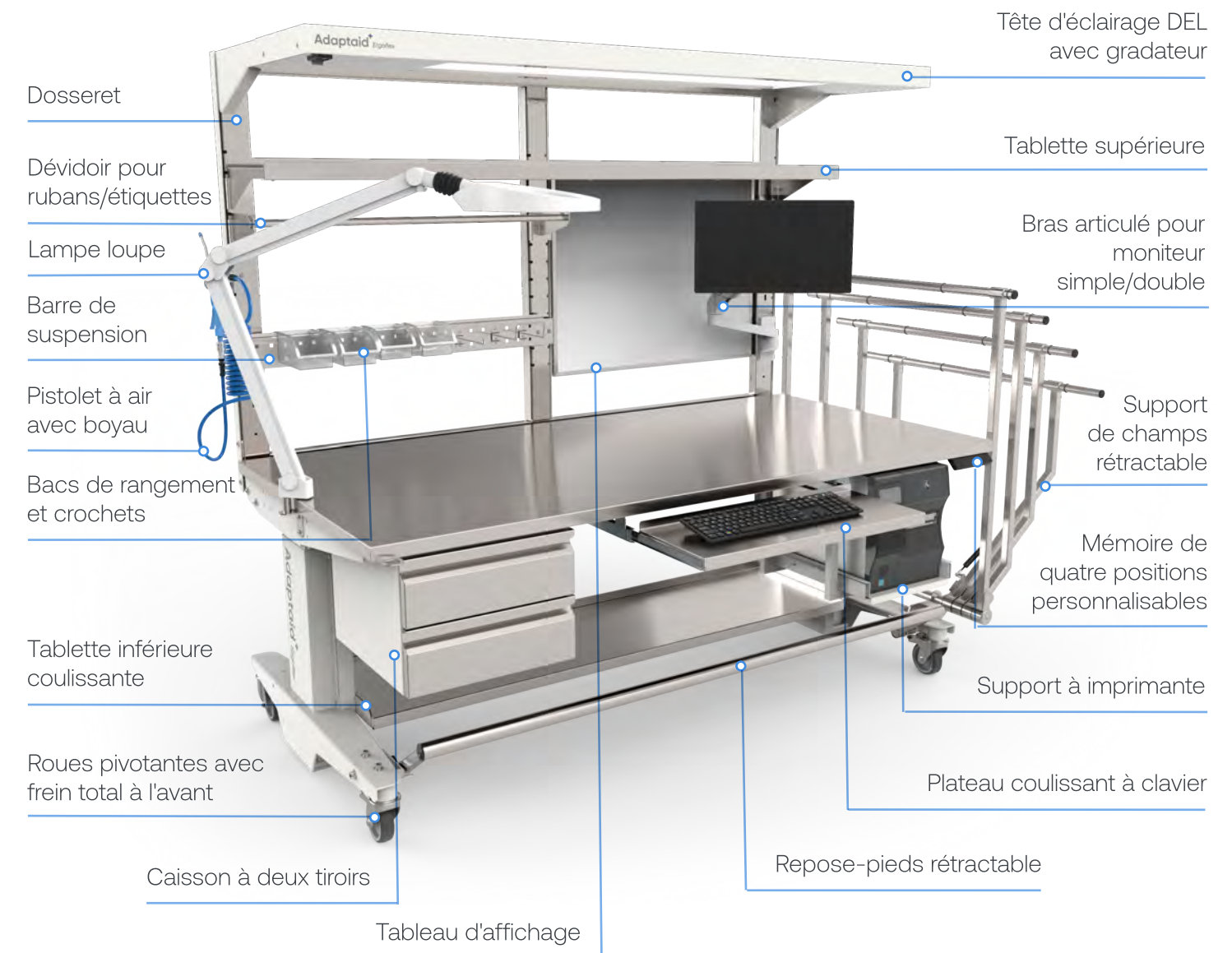

## Support de champs rétractable

Installé directement au piètement de la table de préparation et montage ERGOFLEX, ce support rétractable optimise le rangement des champs d'emballage en réduisant l'encombrement des surfaces de travail, des murs et des planchers.



© ADAPTAID  
PATENT PENDING

### Structure solide

Structure robuste et sans risque de torsion en acier inoxydable de grade 304. Quatre barres cylindriques maintiennent les champs de stérilisation grâce à des anneaux de retenue.

## Une solution ergonomique, conviviale et productive

Le support de champs rétractable ERGOFLEX permet un accès rapide, rapproché et ergonomique aux champs d'emballage.

De plus, sa proximité à la table augmente le confort et l'efficacité du personnel de stérilisation dans l'exécution du processus d'emballage des dispositifs médicaux. Parmi ses nombreux avantages, on retrouve:

- + Diminution de l'encombrement grâce à un cadre refermable.
- + Optimisation de l'espace disponible au sol.
- + Organisation ergonomique des champs d'emballage.
- + Réduction des blessures musculosquelettiques grâce à l'accès latéral des champs.
- + Rehaussement de la productivité permettant un flux de travail continu.
- + Suspension de champs d'emballage de tailles variées.



#### SUPPORT DE CHAMPS DÉPLOYÉ

- + Ouverture rapide et sans effort
- + Accès direct aux champs
- + Profondeur de 19 7/8 pouces (505 mm) lorsque déployé



#### Options additionnelles

- + Barre à rallonge télescopique 40.4 à 51.5 pouces (1026 à 1308 mm)
- + Cadre fixe et non rétractable (modèle RDM-010-SCF)

#### SUPPORT DE CHAMPS REFERMÉ

- + Refermable d'une seule poussée de la main
- + Dégagement latéral accru
- + Profondeur de 12 pouces (305 mm) lorsque refermé



MODÈLES	DIMENSIONS HORS TOUT		*ÉCONOMIE D'ESPACE		
	POUCES	L X P X H	MM	POUCES	MM
RDM-010-SC	39.6 x 19.8 x 45.4	1006 x 505 x 1228	7.8	198	
RDM-010-SCF	39.6 x 20 x 45.4	1006 x 508 x 1228	s/o	s/o	

\* Gain d'espace latéral lorsque le support rétractable est fermé.

## Caractéristiques de base performantes

Créées dans un souci de confort et de sécurité, les tables de travail ERGOFLEX sont idéales pour toute une série de tâches liées au retraitement des instruments chirurgicaux.



### Mobile et robuste

Les piètements de tables en acier enduit électrostatique cuit au four ont été soigneusement conçus pour fournir une base robuste et parfaitement adaptée pour l'intégration du support de champs rétractable ERGOFLEX (en option). Bénéficiant d'une excellente solidité, la capacité de charge de la table est de 750 lb (340 kg). Pour un déplacement aisé, les piètements sont munis de quatre roues pivotantes. Les deux roues situées à l'avant sont équipées d'un frein total qui, d'une seule pression du pied, active la position stationnaire.



### Un plan de travail idéal

Résistant aux désinfectants d'hôpitaux et aux nettoyages répétitifs, le plateau non poreux est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité de grade 304 non réfléchissant avec dessous scellé antibactérien.

### Réglage rapide de la hauteur

Chacun des modèles possède un plan de travail réglable en hauteur par commande électrique. La hauteur du plan de travail peut varier de 30 à 45 pouces (762 à 1143 mm) en fonction de la position souhaitée par l'utilisateur. Il est aussi possible d'enregistrer quatre positions différentes en mémoire pour offrir un réglage rapide de la hauteur aux usagers multiples d'une même station de travail.



## Accessoires configurables qui favorisent l'ergonomie, la productivité et la sécurité

La conception des stations de travail ERGOFLEX vise l'ergonomie, la productivité et la sécurité des usagers avec une vaste gamme d'accessoires optimisant l'inspection, la préparation et l'emballage d'instruments.



Le plateau coulissant pour clavier et souris peut être remis en place dès qu'il n'est plus utile.

- + Caisson à tiroirs
- + Lampe-loupe avec bras réglable
- + Passe-fils avec prises électriques
- + Plateau coulissant pour clavier
- + Repose-pied rétractable
- + Support de champs
- + Support d'imprimante
- + Support d'ordinateur
- + Tablette inférieure rétractable

Le réglage de la hauteur facilite l'alternance entre le travail en position debout et assise.



## Accessoires pratiques pour le dossieret

Parfaitement intégré à la table ERGOFLEX, le dossieret suit les mouvements ascendants et descendants du plan de travail afin d'offrir une hauteur optimale à chaque utilisateur. Le dossieret sert également d'espace de rangement, permettant de garder à portée de main les fournitures et accessoires indispensables au retraitement.

- + Bacs de rangement (tailles variées)
- + Barre de suspension pour rangement
- + Dévidoir pour rubans/étiquettes
- + Pistolet à air avec support
- + Bras articulé pour moniteur simple ou double
- + Tableau d'affichage magnétique
- + Tablette de rangement inclinée
- + Tablette de rangement supérieure
- + Tête d'éclairage DEL avec gradateur







## Bacs de rangement

Ce bac de polycarbonate est autoclavable et offert avec un couvercle transparent qui permet une identification facile et rapide du contenu. Le couvercle peut être bloqué en position ouverte pour faciliter l'accès aux fournitures.

### Contenants autoclavables, utiles et durables

- + Le solide rebord moulé s'accroche facilement aux supports du dossieret de la station de travail ERGOFLEX.
- + Quatre tailles offertes avec couvercles en option pour une plus grande polyvalence de rangement.



APERÇU	MODÈLES DE BACS	DIMENSIONS HORS TOUT			MODÈLES DE COUVERCLES
		POUCES	L X P X H	MM	
	ADA-01610	5 3/8 x 4 1/8 x 3 1/4	137 x 105 x 83	ADA-01611	
	ADA-01612	7 3/8 x 4 1/8 x 3 1/4	187 x 105 x 83	ADA-01613	
	ADA-01614	10 7/8 x 4 1/8 x 3 1/4	276 x 105 x 83	ADA-01615	
	ADA-01616	10 7/8 x 5 1/2 x 5 1/4	276 x 140 x 133	ADA-01617	

## Accessoires ergonomiques

Chaque table ERGOFLEX possède un plan de travail en acier inoxydable de grade 304 non réfléchissant avec dessous scellé antibactérien. Le piètement avec habillage en acier enduit électrostatique cuit au four permet le réglage de la hauteur sur 15 pouces (381 mm) par commande électrique avec mémoire de quatre positions personnalisables. La capacité de charge est de 750 lb (340 kg) réparti uniformément. Le piètement est doté de 4 roues pivotantes de Ø 4 pouces (102 mm) dont 2 munies de frein total.



Support de champs rétractable (ou fixe) en acier inoxydable



Caisson en acier enduit électrostatique cuit au four de 1, 2 ou 3 tiroirs en acier inoxydable avec ou sans serrure




Bras articulé pour moniteur simple/double



Tablette inférieure coulissante en acier inoxydable



Prises électriques, choix de 8 ou 12 prises avec passe-fils

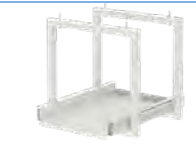

Support coulissant pour imprimante en acier enduit électrostatique cuit au four



Lampe loupe avec bras articulé et support



Plateau coulissant à clavier et souris en acier inoxydable



Tablette d'appoint en acier inoxydable



Repose-pied pleine longueur en acier inoxydable

## Accessoires pour le dossier

Le dossier ERGOFLEX se distingue par sa structure robuste en acier recouvert d'un revêtement électrostatique cuit au four. Offert en tailles de 60, 72 et 84 pouces (1524, 1829 et 2134 mm), sa largeur correspond exactement à celle de la table à laquelle le dossier est installé.

Les montants en acier inoxydable permettent l'installation d'accessoires à la hauteur désirée selon des intervalles de deux pouces (51 mm).



Tête d'éclairage DEL avec gradateur



Tablette de rangement avec bordure anti-glisserement en acier inoxydable



Tablette inclinée en acier inoxydable



Dévidoir pour rubans/étiquettes en acier inoxydable



Bras articulé pour moniteur avec porte-clavier



Bras articulé pour moniteur simple ou double




Tableau d'affichage magnétique



Pistolet à air avec boyau de raccordement et support



Barre de suspension pour rangement en acier inoxydable

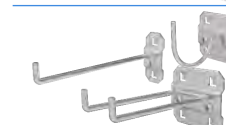

Crochets simples, doubles, courbés de tailles variés en acier inoxydable

\* La disponibilité de certaines options additionnelles peut varier en fonction de la table choisie.

# Adaptaid<sup>+</sup>

Des équipements médicaux performants  
conçus pour les professionnels de la santé

**Pour obtenir plus d'informations  
sur nos produits, contactez notre  
service à la clientèle.**



CONTACTEZ-NOUS  
+1 450-585-7272  
customerservice@adaptaid.com



Fabriqué au  
**CANADA**

©2026 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS

[adaptaid.com](https://adaptaid.com)